

Recolección de muestras con hisopo anogenital para personas con genitales masculinos



A continuación, le detallamos los pasos que debe llevar a cabo cada día a la hora de tomar las muestras con el hisopo anogenital. Para ver el video explicativo, escanee el código.

Cuestiones importantes que debe tener en cuenta antes de tomar las muestras:



Procure estar en un lugar donde nadie pueda entrar o en un baño.



Tome las muestras antes de bañarse o ducharse, o una hora después, como mínimo.



Lávese bien las manos y séqueselas.




No toque la punta del hisopo.



Rellene todos los campos que aparecen en la etiqueta del vial.


01

Con el hisopo, frote toda la zona del cuerpo del pene desde la base hasta la punta y viceversa.

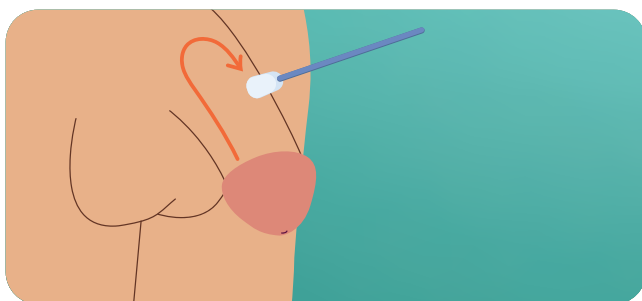


02

Si el pene no está circuncidado, bájese el prepucio y pase el hisopo por la zona húmeda, así como por la cabeza del pene. Si le han practicado una cirugía de circuncisión, vaya al paso siguiente.

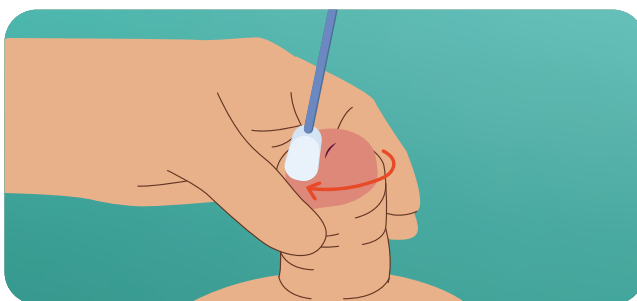


03

Deslice el hisopo por la zona que va del escroto al ano y, al llegar al llegar a esta zona, frótelo con movimientos circulares de unos 4 cm de amplitud.

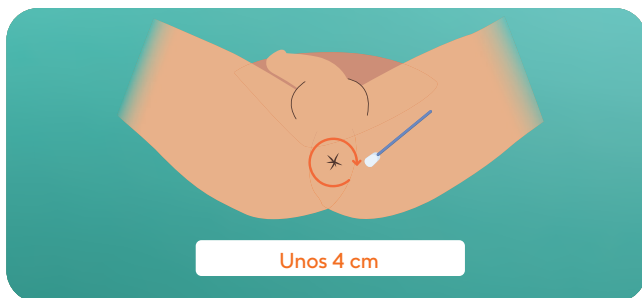

04

Coloque el hisopo en el vial y, cogiéndolo del extremo superior para que sobresalga un poco, doble el vástago o córtelo y asegúrese de que el tapón del tubo se puede cerrar correctamente. Hágalo con cuidado para que no se derrame el contenido. Enrosque bien el tapón del vial para que no se produzcan fugas.

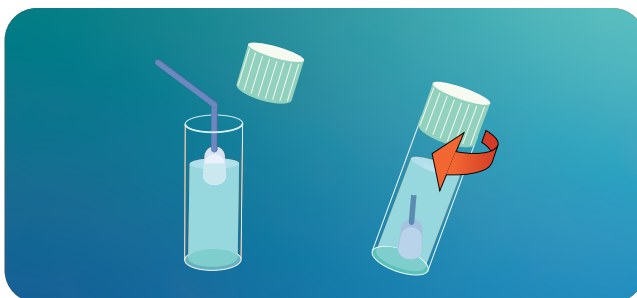

Cuestiones importantes que debe tener en cuenta después de tomar las muestras:



Pegue la etiqueta alrededor del tubo y asegúrese de que toda la información se ve correctamente.



Vuelva a lavarse bien las manos y séqueselas.



Rellene el diario electrónico, siguiendo las indicaciones que le hayan dado.

Si tiene alguna pregunta, pregunte al/a la médico/a o enfermero/a del estudio.